




# Analyses d'urines : Mode d'emploi

Attention, le tube bouchon vert contient un milieu de transport qui peut irriter la peau les yeux ou les muqueuses. En cas de contact, rincer abondamment avec de l'eau.


## Utiliser un modèle de poche adapté au sexe de l'enfant

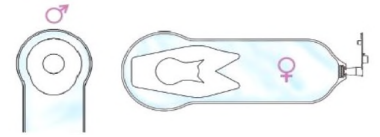


**1** Se laver très soigneusement les mains.  
Mettre l'enfant sur le dos, les jambes écartées.

Nettoyer soigneusement la région uro-génitale de l'enfant à l'eau et au savon neutre.

La peau de l'enfant doit être propre, sèche, non recouverte de poudre ou de crème et ne présenter aucune irritation.  
Ouvrir le sachet contenant la poche, et s'assurer que le bouchon d'écoulement est correctement fermé.

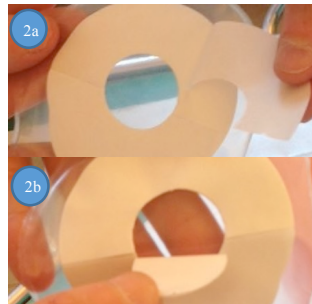


Détacher et jeter la découpe centrale.  
Retirer doucement et complètement le papier protecteur qui protège l'adhésif.

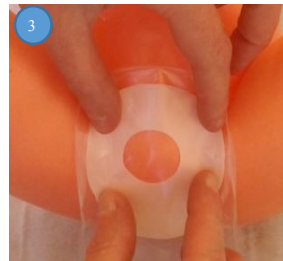

Appuyer la poche autour de l'orifice urinaire de l'enfant en appuyant sur l'adhésif pour garantir une bonne adhérence sur toute la surface.



Si absence d'urines après 30 min, recommencer avec une nouvelle poche.

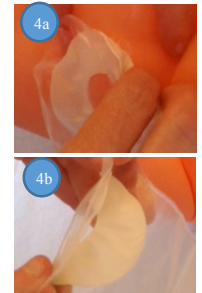

Enlever la poche en soulevant un coin de la partie adhésive et détacher doucement.  
Coller l'adhésif face contre face.



Dévisser le couvercle du pot et posez-le sur une surface plane.

Ne pas toucher la canule du couvercle.




Prendre la poche, ôter le bouchon d'écoulement et verser la totalité des urines dans le pot.



Replacer le couvercle (bien le visser).  
A l'aide de la graduation, noter le volume d'urine :  
< 10 ml ⇒ ne pas remplir les tubes, apporter le flacon dans les 2 heures au laboratoire  
> 10 ml ⇒ retirer l'étiquette de protection (ne pas la jeter) et passer à l'étape suivante



Volume > 20 ml :  
Pousser le petit tube bouchon beige dans l'orifice de transfert.  
Attendre la fin du remplissage puis passer au grand tube bouchon vert.  
Volume entre 10 et 20 ml :  
Ne remplir que le grand tube bouchon vert.  
Replacer l'étiquette de protection.

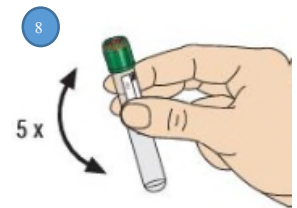

Retourner 5 fois les tubes

**Indiquer sur le pot et sur chaque tube :**  
**Nom-Prénom**  
**Date de naissance**


**9** Placer les tubes pleins et le pot vide\* dans le sachet double poche.

**Compléter le formulaire au dos de cette feuille**

Insérer ce formulaire et l'ordonnance dans la pochette externe du sachet

Après le recueil, maintenir les tubes à **température ambiante (ne pas réfrigérer)**

\*ou éliminer le pot dans la filière DASRI

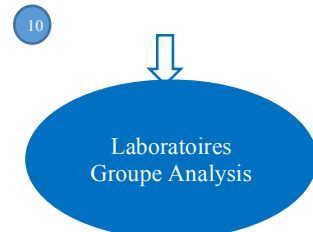

Apporter le sachet au laboratoire ou le déposer dans un point de collecte.

**Délai de transmission**  
**Recommandé < 24h**  
Acceptable < 48h

	Avant le recueil	Quand effectuer le recueil ?	Quels flacons utiliser ?	Puis	Comment recueillir les urines ?	Remarques
<b>ECBU Antigénurie</b>	Voir notice ci-dessus				Voir notice ci-dessus	
<b>Chimie urinaire</b>	Voir notice ci-dessus				Environ 50 ml d'urine	Voir notice ci-dessus



# Demande d'analyses d'urines « Nourrisson »

## IDENTITE PATIENT (ou étiquette)

NOM :

Prénom :

Nom de naissance :

Né(e) le :

Sexe :  H  F

## En cas de changement ou patient non connu du laboratoire

Adresse :

Tél :

N° de sécurité sociale :

Caisse :

Mutuelle :

Validité jusqu'au :

Assuré (Si différent du patient) :

NOM :

Prénom :

Date de naissance :

## Examens demandés (ou joindre ordonnance)

Nom du Prescripteur :

Date :

Signature :

*Merci de bien vouloir compléter ces renseignements*

### Recueil

Date de recueil :

Heure de recueil :

Conservation :  T ambiante  Réfrigérateur

### Prélèvement

Poche nourrisson

### Contexte de l'examen

Bilan de contrôle

Bilan ponctuel

Fièvre

Bandelette urinaire positive pour leucocytes et/ou nitrites

Autre :

Bilan suivi

Traitement antibiotique récent: .....

### Quel est l'état de santé de l'enfant ?

Antécédent d'uropathie (reflux vésico-urétéral etc.)

Antécédent de pyélonéphrite aiguë

Allergie à la pénicilline

Hospitalisation récente

### Transmission complémentaire des résultats

Résultat à téléphoner au

Résultats à faxer au

Demande de création de compte internet

N° portable du patient :

*Consultez la notice au dos*